


DURAN®

GL 45 BROMOBUTYL-KAUTSCHUK
FLASCHENSTOPFEN

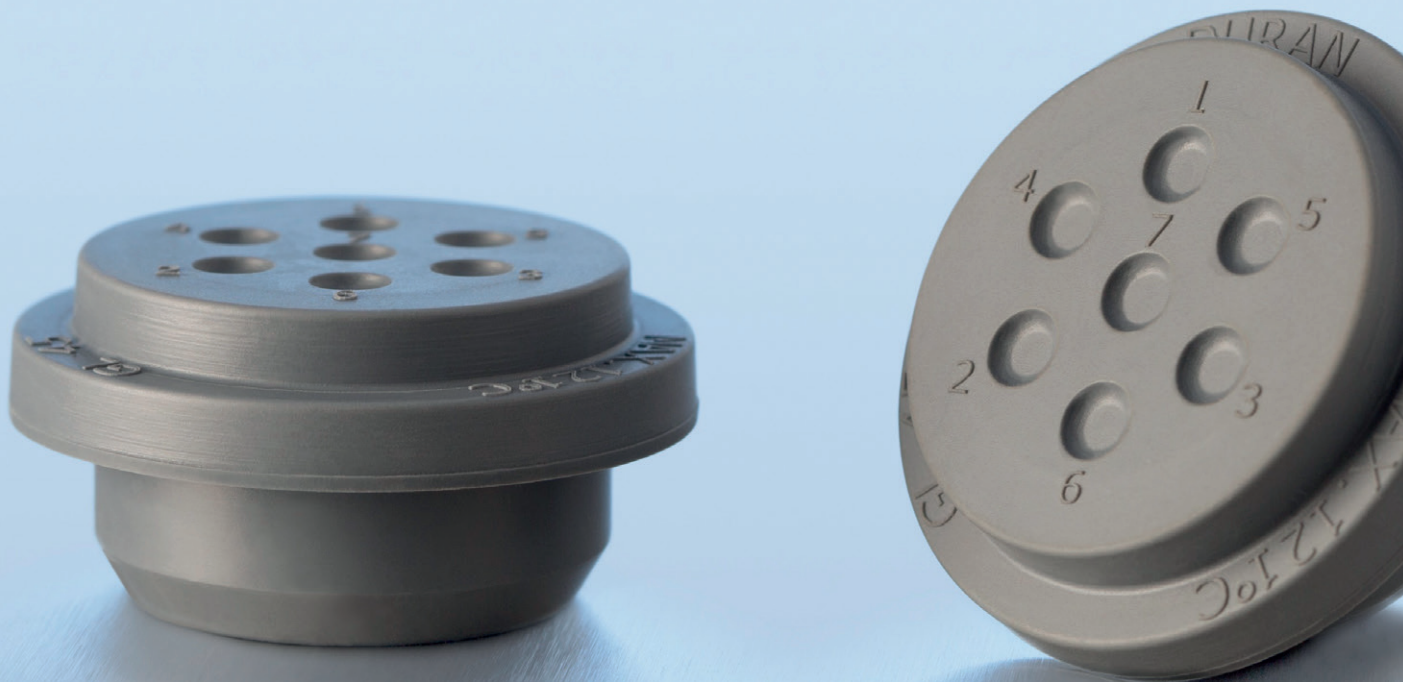

**DURAN
WHEATON
KIMBLE**

Excellence in your hands

DURAN® GL 45 BROMOBUTYL-KAUTSCHUK FLASCHENSTOPFEN

Der DURAN® Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 45 Laborflaschen geeignet ist. Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Butylkautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze.

Anwendungsbereiche

- Kulturen mit anaeroben Mikroorganismen (druckfeste Flaschen werden empfohlen)
- Aufbewahrung von anaeroben Kulturmedien (Braunglas-Flaschen werden empfohlen)
- Untersuchung der aeroben Methanoxidation (MOx)
- Aufbewahrung von sauerstoffempfindlichen Materialien
- Anwendungen, die eine Gasspülung oder das Umfüllen von Proben mit einer Spritze erfordern



Eigenschaften

- Stopfenform und Materialeigenschaften sind für DURAN® GL 45 Flaschen mit einer Größe von 100 ml bis 20 Liter optimiert
- Geringe Durchlässigkeit für Luft, Gase und Feuchtigkeit
- Aus hochreinem Bromobutyl-Kautschukelastomer hergestellt
- Elastomer entspricht EP 3.2.9 Typ I Chemie und Eindringtest
- Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen können
- Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel
- Oberseite ist ausgestattet mit sieben nummerierten halbrunden Vertiefungen für das optimale Durchstechen mit einer Nadel
- Einsetzbar innerhalb eines Temperaturbereichs von -50 bis +121 °C
- Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Verwendung mit dem DURAN® GL 45 Schraubverschluss für zusätzliche Sicherheit*

Bestellinformation

	Best.-Nr.	Beschreibung	St. / VE
NEU	29 206 28 03	DURAN® Kautschuk-Stopfen für GL 45 Laborflaschen, gerader Stopfen, Bromobutyl grau	10
	29 227 10 07	DURAN® Schraubverschluss GL 45 PBT Rot mit 34 mm Mittelöffnung	10

Kompatible Produkte

Best.-Nr.	Beschreibung	St. / VE
21 810 24 06	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 100 ml	10
10 922 34	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 250 ml	10
10 922 35	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 500 ml	10
21 810 54 03	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 1.000 ml	10
21 816 24 03	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 100 ml	10
10 943 67	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 250 ml	10
10 943 68	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 500 ml	10
21 816 54 09	DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 1.000 ml	10

*Standardmäßige original DURAN® GL 45 Laborflaschen sind nicht druckfest. Wenn von einem Druckaufbau auszugehen ist, wird empfohlen, den Stopfen ohne GL 45 Schraubverbindungsverschluss zu verwenden. In diesem Fall ist die Verwendung von druckfesten Flaschen wie beispielsweise der DURAN® pressure plus+ Laborglasflasche zu empfehlen.



DWK Life Sciences GmbH
Otto-Schott-Str. 21
97877 Wertheim / Main
Germany

Phone: +49 (0) 6131 - 1445 4131
Fax: +49 (0) 6131 - 1445 4016
sales@DWK-LifeSciences.com
www.DWK-LifeSciences.com

